

WOUND CARE DryMax[®]

SOFT


DryMax Soft ist eine sterile superabsorbierende Wundauflage und zur Behandlung von exsudierenden Wunden vorgesehen. DryMax Soft absorbiert Wundflüssigkeit und bindet sie im Verbandstoff. Die Wundflüssigkeit wird von der Auflage aufgesaugt und im Kern in Form eines Gels gespeichert, wodurch das Risiko von Mazeration (Aufweichung) minimiert und eine feuchte Wundumgebung beibehalten wird.

DryMax Soft


Die nahtlose Abdeckung erleichtert das Platzieren über der Wunde. Das Design der Auflage ermöglicht die beidseitige Anwendung des Verbandstoffs in Richtung Wunde. Durch diese Eigenschaft wird auch das Aufeinanderschichten mehrerer Auflagen ermöglicht, sollte zusätzliche Absorptionskapazität benötigt werden.

Die Wundauflage bleibt trocken und komfortabel für die Patienten. Gleichzeitig trägt sie zu einer feuchten Wundumgebung bei. Die hydrophile Kontaktschicht leitet die Flüssigkeiten effektiv von der Wunde ab und verteilt sie gleichmäßig im ABSORBEST-Kern.


Die ultradünne und besonders weiche Beschaffenheit ermöglicht die Verwendung auf allen Körperteilen. DryMax Soft ist auch für die Kompressionstherapie geeignet.

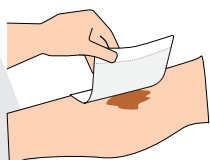

Die Auflage muss direkt auf der Wunde oder zusammen mit einem weiteren geeigneten Verbandstoff platziert werden.

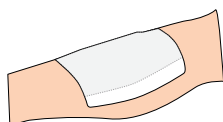

Sichern Sie die Wundauflage mit einer geeigneten Bandage, einem Tape- oder Klebeverband

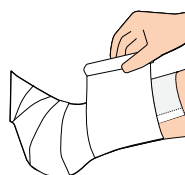

DryMax Soft kann in Verbindung mit Kompressionstherapie angewendet werden.

DAS PRODUKTSORTIMENT VON DRYMAX SOFT

| Artikel | REF | PZN | Stk./ Schachtel | Maße (cm) | Absorptions- kapazität* |
|------------------------|-----------|----------|--------------------|--------------|----------------------------|
| DryMax Soft 5x5 cm | F60125/10 | 19547445 | 10 | 5x5 | 25 ml |
| DryMax Soft 7.5x7.5 cm | F60011/10 | 14360765 | 10 | 7.5x7.5 | 60 ml |
| DryMax Soft 7.5x7.5 cm | F60011/25 | 14360771 | 25 | 7.5x7.5 | 60 ml |
| DryMax Soft 10x10 cm | F60013/10 | 12869393 | 10 | 10x10 | 130 ml |
| DryMax Soft 10x10 cm | F60013/25 | 13422139 | 25 | 10x10 | 130 ml |
| DryMax Soft 10x20 cm | F60015/10 | 12869401 | 10 | 10x20 | 330 ml |
| DryMax Soft 10x20 cm | F60015/25 | 13422145 | 25 | 10x20 | 330 ml |
| DryMax Soft 20x20 cm | F60016/10 | 12869418 | 10 | 20x20 | 600 ml |
| DryMax Soft 20x20 cm | F60016/25 | 13422151 | 25 | 20x20 | 600 ml |
| DryMax Soft 20x30 cm | F60017/10 | 12869424 | 10 | 20x30 | 960 ml |
| DryMax Soft 20x30 cm | F60017/25 | 13422168 | 25 | 20x30 | 960 ml |
| DryMax Soft 37x56 cm | F60019/10 | 14360788 | 10 | 37x56 | 3000 ml |



*) Gemäß der internationalen Norm EN 13726-1



- Kosteneffektiv
- Anwenderfreundlich
- Erhöhter Patientenkomfort
- Verbesserte Wundheilung



Vertriebspartner: Bamboo Health Care GmbH
Zur Herrenmühle 2
79356 Eichstetten
Telefon: 07663 914 03 - 12 / Fax 14
mail@bamboo-health-care.com
www.bamboo-health-care.com



Ihr Vertriebspartner in Deutschland



mediset clinical products GmbH

Telefon: +49 (0)2104 - 3 68 32 Poststr. 15
Telefax: +49 (0)2104 - 3 68 95 04158 Leipzig

E-Mail: info@mediset.de
www.mediset.de



Manufactured by Absorbist AB Sweden
www.absorbist.se | info@absorbist.se