FACTSHEET

BAUERFEIND®

VenoTrain® ulcertec
DER KOMPRESSIONSSPEZIALIST BEI ULCUS CRURIS VENOSUM



Die Kompressionstherapie ist essenziell bei der Behandlung des Ulcus cruris venosum. Nach der anfänglichen Entstauung des venösen Ödems empfiehlt die Leitlinie den Einsatz von Ulkus-Strumpfsystemen.[1] Der VenoTrain ulcertec bietet eine abgestimmte Kompression, erhöht die Heilungsrate im Vergleich zu herkömmlichen Kompressionsverbänden.[2]

INDIKATIONEN[3]

+ florides Ulcus cruris venosum ohne Ödem (CEAP-Stadium 6)
+ Prävention von rezidivierenden Ulcera crura venosa (CEAP-Stadium 5)
+ florides Ulcus cruris venosum mit Ödem / Ödemneigung des Oberschenkels[4]
+ Ulcus cruris venosum mit Varikose am Oberschenkel[4]
+ Ulcus cruris postthromboticum vom Mehretagentyp (Becken und / oder Oberschenkel und / oder Unterschenkel)[4]

»Die Besonderheit des VenoTrain ulcertec liegt in dem Gestrick des Oberstrumpfes. Dies erleichtert das Anlegen, entfaltet aber am Bein durch seinen kurzzugelastischen Charakter einen stärkeren Anpressdruck, besonders in der Bewegung (Arbeitsdruck). Somit kann eine höhere Abheilungsrate erzielt werden, als bei der Verwendung herkömmlicher Kompressionsstrümpfe oder kurzzügiger Kompressionsverbände.[2]«



Univ.-Prof. Dr. med. Michael Jünger
MScH (ehemaliger Direktor der Klinik und Poliklinik für Hautkrankheiten der Universitätsmedizin Greifswald)

PRODUKTMERKMALE UND THERAPIEVORTEILE

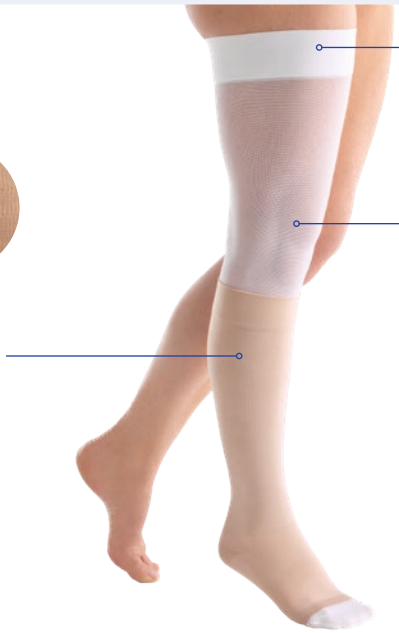


Oberstrumpf (AD)
mit speziell von Bauerfeind entwickeltem Rhomboid-Gestrick

Dehnung in Querrichtung
ermöglicht einfaches, schmerzfreies An- und Ablegen

Dehnung in Längsrichtung
erhöht sofort den Anpressdruck für eine optimale Wirkung

Ausführung in moderate und strong
ermöglicht individuelle Versorgung je nach Schweregrad und Ausprägung



Silikonhaftband Sensitiv
für empfindliche Haut

Unterstrumpf
empfohlen bei zusätzlicher Varikose und Ödemneigung im Oberschenkel

- aus hautfreundlichem Material
- Ausführung in AD und AG
- waschbar bei 95° C



[1] Deutsche Gesellschaft für Phlebologie und Lymphologie e.V.: S2K-Leitlinie Diagnostik und Therapie des Ulcus cruris venosum, 4.1, 2024, https://register.awmf.org/de/leitlinien/detail/037-009 (abgerufen am: 05.07.2024)

[2] Jünger, M., et al. (2004) Efficacy and tolerability of an ulcer compression stocking for therapy of chronic venous ulcer compared with a below-knee compression bandage: results from a prospective, randomized, multicentre trial. Current medical research and opinion doi: 10.1185/030079904X4086.

[3] Für ergänzende Hinweise zu Indikationen, Gegenindikationen und der Handhabung des von Ihnen gewünschten Produkts bitte die jeweilige Gebrauchsanweisung konsultieren!

[4] Zusätzliche Indikationen für die Variante mit oberschenkellangem Unterstrumpf.

→ BAUERFEIND.COM

● SERIE ○ MASSANFERTIGUNG

ABSCHLUSS HAFTBAND	AD	AG
Trikotrand / Komfortbündchen	●○	
Silikon Sensitiv		●○

DETAILS

GRÖSSENSYSTEMATIK X5+ (XS – XL)

KOMPRESSIONSKLASSEN

- **39 – moderate:** Ccl 3 (34 – 46 mmHg); Unterstrumpf mit leichter Kompression, der in Kombination mit dem Oberstrumpf einen Kompressionsdruck im unteren Bereich der Kompressionsklasse 3 ergibt
- **46 – strong:** Ccl 3 (34 – 46 mmHg); Unterstrumpf mit mittlerer Kompression, der in Kombination mit dem Oberstrumpf einen Kompressionsdruck im oberen Bereich der Kompressionsklasse 3 ergibt

FUSSSPITZE

offen (Oberstrumpf), geschlossen (Unterstrumpf)

MATERIALZUSAMMENSETZUNG

UNTERSTRUMPF AG[2]

- **39 – moderate:** 68 % Polyamid, 32 % Elasthan

UNTERSTRUMPF AD

- **39 – moderate:** 87 % Polyamid, 13 % Elasthan
- **46 – strong:** 69 % Polyamid, 31 % Elasthan

OBERSTRUMPF (39 – moderate / 46 – strong)

- Serie: 79 % Polyamid, 21 % Elasthan
- Maß: 68 % Polyamid, 32 % Elasthan

PFLEGEHINWEISE

Oberstrumpf: 

Unterstrumpf: 

FARBEN

BEIGE
OBERSTRUMPF

WEISS
UNTERSTRUMPF

Weitere Patienten- und Produktvideos finden Sie hier: experts.bauerfeind.com/venotrain-ulcertec

Studien und weitere Informationen zum Ulcus cruris Venosum unter: bauerfeind-life.com/ulcus-cruris-venosum

AUSFÜHRUNGEN

VenoTrain ulcertec, 39 – moderate (AD)
VenoTrain ulcertec, 46 – strong (AD)
(Set bestehend aus einem Ober- und zwei Unterstrümpfen, jeweils AD)
Serie 17.06.08.1003
Maß 17.06.20.1003 moderate
17.06.20.1002 strong

AD

VenoTrain ulcertec, 39 – moderate (AD / AG)
(Set bestehend aus einem Ober- und zwei Unterstrümpfen, Unterstrumpf AG, Oberstrumpf AD)
Serie 17.06.08.2001
Maß 17.06.20.2001

AG
AD

Unterstrumpf-Set (AD) – moderate bzw. strong
(Set bestehend aus drei Unterstrümpfen, AD)
Serie / Maß 17.99.99.2024

AD

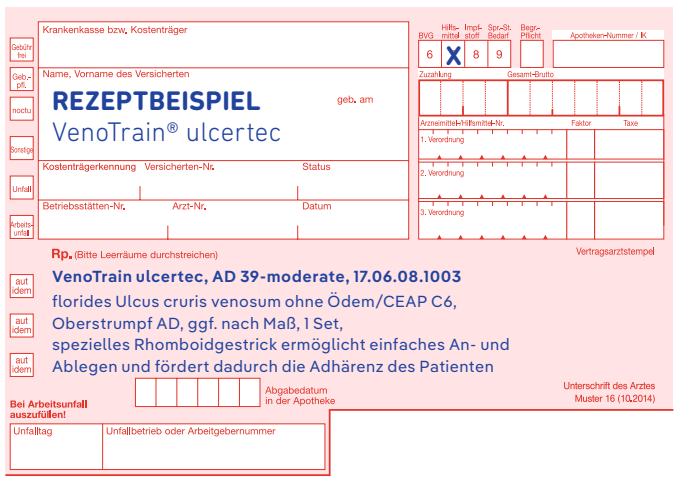
Unterstrumpf-Set (AG) – moderate
(Set bestehend aus drei Unterstrümpfen, AG)
Serie / Maß 17.99.99.2024

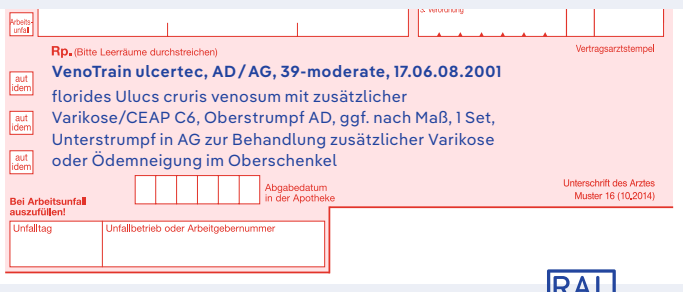
AG

VERORDNUNGSEMPFEHLUNG

ZWEITVER-ORDNUNG AUS HYGIENISCHEN GRÜNDEN

Eine budgetneutrale, namentliche Verordnung ist beim VenoTrain ulcertec durch eine patienten-individuelle Begründung möglich. Unsere Rezept-beispiele unterstützen Sie dabei.


Krankenkasse bzw. Kostenträger
Name, Vorname des Versicherten
REZEPTBEISPIEL
VenoTrain® ulcertec
geb. am
Kostenträgerkennung Versicherten-Nr. Status
Betriebsstätten-Nr. Arzt-Nr. Datum
Apotheken-Nummer / IK
Rp. (Bitte Leerräume durchstreichen)
Vertragsarztstempel
VenoTrain ulcertec, AD 39-moderate, 17.06.08.1003
florides Ulcus cruris venosum ohne Ödem/CEAP C6, Oberstrumpf AD, ggf. nach Maß, 1 Set, spezielles Rhomboidgestrick ermöglicht einfaches An- und Ablegen und fördert dadurch die Adhärenz des Patienten
Abgabedatum in der Apotheke
Unterschrift des Arztes
Muster 16 (10.2014)
Bei Arbeitsunfall auszufüllen!
Unfalltag
Unfallbetrieb oder Arbeitgebernummer


Rp. (Bitte Leerräume durchstreichen)
Vertragsarztstempel
VenoTrain ulcertec, AD / AG, 39-moderate, 17.06.08.2001
florides Ulucs cruris venosum mit zusätzlicher Varikose/CEAP C6, Oberstrumpf AD, ggf. nach Maß, 1 Set, Unterstrumpf in AG zur Behandlung zusätzlicher Varikose oder Ödemneigung im Oberschenkel
Abgabedatum in der Apotheke
Unterschrift des Arztes
Muster 16 (10.2014)
Bei Arbeitsunfall auszufüllen!
Unfalltag
Unfallbetrieb oder Arbeitgebernummer

[1] Der Unterstrumpf AG hat zusätzlich am oberen Strumpfrand ein Silikonhaftband. Dieses besteht aus Polyamid, Elasthan und Silikon

Rev.0 – 2024-08