BAUERFEIND®

VenoTrain® angioflow
DER KOMPRESSIONSSPEZIALIST TROTZ PAVK.



Die Kompressionsversorgung bei Patienten mit einer CVI kann sich als schwierig erweisen, wenn Begleiterkrankungen wie die periphere arterielle Verschlusskrankheit (pAVK) auftreten. Mit dem VenoTrain angioflow versorgen Sie auch diese Fälle sicher.[1] Das kurzzugelastische Gestrick bietet in Ccl 1 einen hohen Arbeitsdruck und einen niedrigen Ruhedruck. Dadurch wird die arterielle Perfusion nicht durch die Kompressionswirkung des Strumpfes beeinflusst.

INDIKATIONEN[2]

+ Verbesserung chronischer Venenerkrankungen
+ Verbesserung venöser Symptome
+ Prävention und Therapie venöser Ödeme
+ chronische Venenkrankheit mit Hautveränderungen (Atrophie blanche, Dermatoliposklerose)
+ postthrombotisches Syndrom
+ Ulcus cruris postthromboticum vom Mehretagentyp (Becken und / oder Oberschenkel und / oder Unterschenkel)

»Für eine sichere und effektive Therapie der CVI bei beginnender PAVK muss der Kompressionsstrumpf einen geringen Ruhedruck, d.h. keine Reduktion der arteriellen Perfusion, und einen hohen Arbeitsdruck aufweisen. Dann kommt es während des Tragens zu dem gewünschten Massageeffekt und einer verbesserten venösen Pumpfunktion, welche die Beine wirksam entstaut.«




Prof. Dr. M. Stücker
Geschäftsführender Direktor der Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie, Ruhr-Universität Bochum

PRODUKTMERKMALE UND THERAPIEVORTEILE



hautfreundlicher Mikrofaseranteil
garantiert angenehmen Tragekomfort

speziell entwickeltes Konturstrickverfahren
für eine individuelle und passgenaue Versorgung

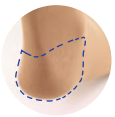

anatomisch gestrickte 90°-Easy-Ferse
erleichtert das An- und Ablegen

extrabreites Haftband
für sicheren Halt

kurzzugelastisches Gestrick
sorgt für hohen Arbeitsdruck in der Bewegung und niedrigen Ruhedruck in Ccl 1



kompressionsarmer Komfortfuß
vermeidet Druckstellen

[1] Stücker, M., et. al (2020). Sicherheit eines Kompressionsstrumpfes für Patienten mit chronischer venöser Insuffizienz (CVI) und peripherer arterieller Verschlusskrankheit (pAVK). JDDG: Journal der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft, doi: 10.1111/ddg.14042_g

[2] Die vollständige Liste der Indikationen finden Sie in der VenoTrain-angioflow-Gebrauchsanweisung.



AUS-
SCHLIESSLICH
MASSAN-
FERTIGUNG

DETAILS

MASSANFERTIGUNG
KOMPRESSIONSKLASSEN Ccl 1 (18 – 21 mmHg)
FUSSSPITZE geschlossen
AUSFÜHRUNG AD mit Noppenhaftband
MATERIALZUSAMMENSETZUNG 79 % Polyamid, 21 % Elasthan
HILFSMITTELNUMMER 17.06.10.0095
PFLEGEHINWEISE

FARBEN

CARAMEL

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 598-0153 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

RAL GÜTEZEICHEN MEDIZINISCHE KOMPRESSIONS-STRÜMPFE

CE MD

IN STUDIE BELEGT[1]

VenoTrain angioflow bei Patienten mit kombinierter CVI / pAVK nach 14 Tagen Tragezeit:

+ konstante arterielle Durchblutung
+ keine negativen Hautveränderungen (z. B. Einschnürungen, Druckstellen, Hautschädigungen)
+ bewährt sich bei Patienten durch einfache Handhabung und gute Passform
+ Patienten bewerteten den VenoTrain angioflow als sehr gut bis gut
+ signifikante Verbesserung der CVI-Beschwerden (z. B. Reduktion von Schmerzen, Schweregefühl und Schwellung der Beine)

Ein E-Learning sowie weitere Patienten- und Produktvideos finden Sie hier:
experts.bauerfeind.com/venotrain-angioflow

Studien und weitere Informationen zur Kompressionstherapie trotz pAVK unter:
bauerfeind-life.com/cvi-und-pavk

VERORDNUNGSEMPFEHLUNG

Eine budgetneutrale, namentliche Verordnung ist beim VenoTrain angioflow durch eine patientenindividuelle Begründung möglich. Unser Rezeptbeispiel unterstützt Sie dabei.

Krankenkasse bzw. Kostenträger

Name, Vorname des Versicherten

REZEPTBEISPIEL geb. am
VenoTrain® angioflow

Kostenträgerkennung Versicherten-Nr. Status

Betriebsstätten-Nr. Arzt-Nr. Datum

BVG 6 | Hilfsmittel X | Impfstoff 8 | Spr.-St. Bedarf 9 | Begr.-Pflicht

Zuzahlung Gesamt-Brutto

1. Verordnung
2. Verordnung
3. Verordnung

Rp. (Bitte Leerräume durchstreichen)
VenoTrain angioflow, 17.06.10.0095
zusätzliche Verordnung: Noppenhaftband, 17.99.99.2008
CVI / CEAP C3; Ccl1, Knieströmpfe (AD), Maßanfertigung, geschlossene Fußspitze; 1 Stück links, 1 Stück rechts; niedriger Ruhedruck und hoher Arbeitsdruck in Bewegung (kurzzügiges Konturgestrick) aufgrund begleitender pAVK (ABI < 0,9 und > 0,5)

Abgabedatum in der Apotheke

Bei Arbeitsunfall auszufüllen!
Unfalltag | Unfallbetrieb oder Arbeitgebernummer

Unterschrift des Arzte
Muster 16 (10.201

[1] Stücker, M., et. al (2020). Sicherheit eines Kompressionsstrumpfes für Patienten mit chronischer venöser Insuffizienz (CVI) und peripherer arterieller Verschlusskrankheit (pAVK). JDDG: Journal der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft, doi: 10.1111/ddg.14042_g

Rev. 0 – 2024-08