
SCHWANGERSCHAFT BEI LYMPH- UND LIPÖDEMPATIENTINNEN

»Keine Angst vor einer Schwangerschaft bei einer Ödemerkrankung«, sagt Dr. med. Anya Miller, Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Lymphologie (DGL) aus Berlin. Für sie hat die Kompressionstherapie mit flachgestrickten Kompressionsstrümpfen in der Schwangerschaft einen hohen Stellenwert. Dabei müssen die Patientinnen unter Umständen adaptiert bestrumpft werden. Das heißt beispielsweise: wenn das Anziehen einer Strumpfhose Schwierigkeiten bereitet, erhält die Patientin alternativ Kniestrümpfe und Caprihose. Gleiches gilt für das Lipödem. Es wird da bestrumpft, wo das Fettgewebe vermehrt ist und wo die Beschwerden liegen. Beim Lipödem des »Hüfttyps« muss zwingend der Bereich um die Hüften geschlossen sein, entweder mit einer Strumpfhose oder ebenfalls mit Caprihose und Kniestrümpfen.



BESONDERHEITEN DER SCHWANGERSCHAFTSVERSORGUNGEN VenoTrain® curaflow

- ✚ verbesserte Passform des Leibteils
- ✚ Schwangerschaftseinsätze für:
  - Schwangerschaftsmonat 1 – 3
  - Schwangerschaftsmonat 4 – 6
  - Schwangerschaftsmonat ab 7

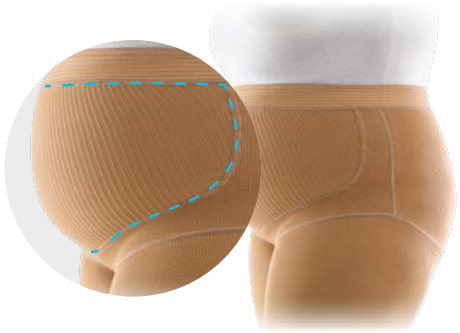

SO BESTELLEN SIE MIT DEM VenoTrain®-curaflow-BESTELLBLATT

Bein

Farben ☐ Creme* ☐ Caramel* ☐ Schwarz* ☐ Anthrazit ☐ Marine ☐ Bordeaux ☐ Royal ☐ Ocean ☐ Coral

Kompression	Ccl1	Ccl2	Ccl3	Ccl4
linkes Bein	☐	☐	☐	☐
rechtes Bein	☐	☐	☐	☐
Leibteil	☐	☐	☐	☐

Anzahl Paar _____ Stück _____

mehrteilige Versorgung ☐

* Farben Creme, Caramel und Schwarz als Klinikversorgung lieferbar.

Strumpf:
- AD ☐
- AG ☐
- Beinstück _____
- porös unten ☐

Abschluss:
- Noppenhaftband
  - breit (4,7 cm) ☐
  - schmal (2,5 cm) ☐
- Streifenhaftband ☐
- Hüftbefestigung ☐
- seitlich schräger Abschluss ☐
- Beinerhöhung vorn ☐

Hose:
- Hose AT ☐
- Umstandshose ATU ☒
- Einbeinhose ATE ☐
- Leggin BT ☐
- Leggin B1T ☐
- Caprihose CT ☐
- Bermuda ET ☐
- Radlerhose FT ☐

Taille Abschluss:
- Noppenhaftband ☐
- Taillenband ☐
- Loch-/Durchziehgummi ☐

Zusätze:
- ohne Kniezone / Knieellipse ☐
- Reißverschluss* ☐
- Futterstoff* ☐
- Haftbandstück innen*
  - breit (4,7 cm) ☐
  - schmal (2,5 cm) ☐

Damenzwickel: ☐ Standard ☐ mit Wäscheschutz ☐ kompressiv ☐ offen

Herrenzwickel: ☐ Standard ☐ mit Eingriff ☐ kompressiv

* Länge und Lage unter Sonderwünsche

Alle Angaben in cm. Für falsche Maßangaben haftet der Besteller. Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen. Gefertigt werden die angekreuzten Zusätze.


Sonderwünsche: Schwangerschaftsversorgung, aktueller Schwangerschaftsmonat 3

Unter Sonderwünsche unbedingt angeben!
- Schwangerschaftsversorgung
- Schwangerschaftsmonat

Rev.1 – 2021-12_2714230302000

BAUERFEIND AG
Triebeser Straße 16
07937 Zeulenroda-Triebes
E info@bauerfeind.com
T +49 (0) 36628 66 2000
F +49 (0) 36628 66 2999
Service-Hotline Lymphologie +49 (0) 800 00 10 560


SO BESTELLEN SIE SCHNELL UND EINFACH ONLINE ÜBER UNSEREN EXPERTSSHOP AUF www.experts.bauerfeind.com

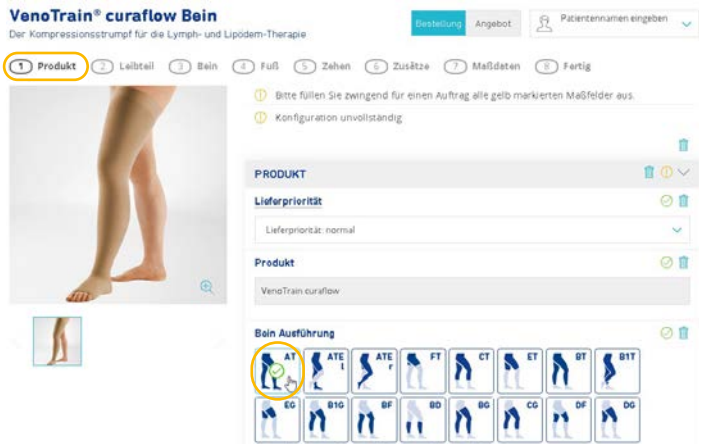

SCHRITT 1


bei Onlinebestellungen:

1. VenoTrain curaflow Bein im Onlineshop auswählen
2. auf der Detailseite unter Schritt 1 **Produkt** Ausführung = AT wählen
3. restliche Auswahl zu Schritt 1 **Produkt** treffen (z. B.: CCl., Farbe, ...)

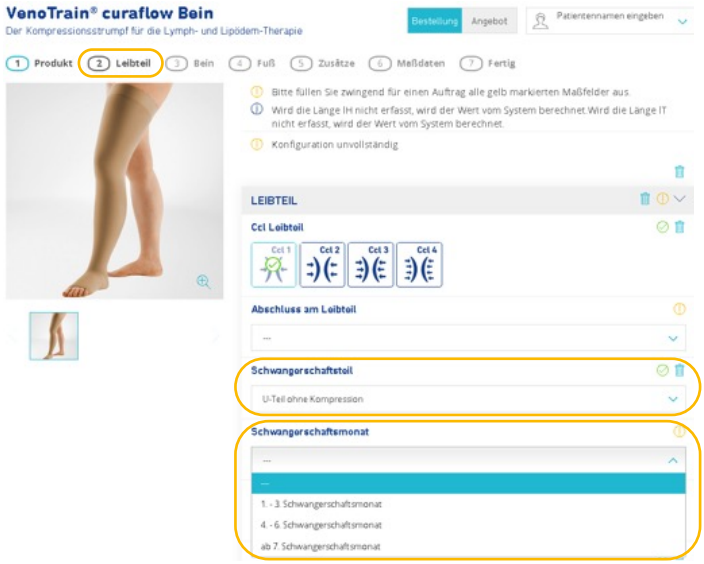

SCHRITT 2

1. **Leibteil** bei **Schwangerschaftsteil** = **U-Teil ohne Kompression** wählen
2. unter **Schwangerschaftsmonat** eine der drei Auswahlmöglichkeiten wählen
3. restliche Auswahl zu Schritt 2 **Leibteil** treffen (z. B.: Abschluss, Zwickel, ...)

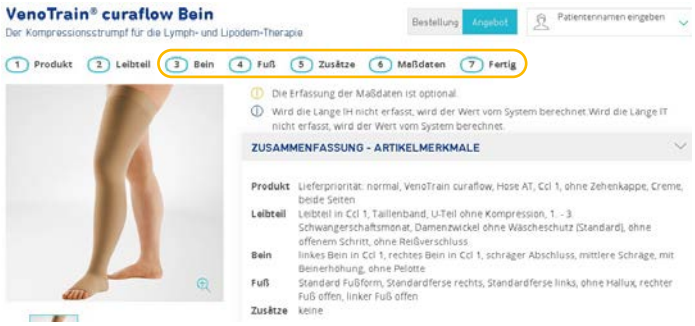

SCHRITT 3 – 7

sind nicht schwangerschaftsspezifisch und können wie gewünscht gewählt werden

Zum Abschluss erhalten Sie eine Zusammenfassung der gewählten Merkmale und können daraufhin entweder ein Angebot oder eine Bestellung zur getroffenen Auswahl aufgeben.

zur Hilfeseite



NUTZEN SIE AUCH DIE ANGEBOTSFUNKTION!

Bestellung | Angebot